

	品名	内容	コード番号	共通商品コード(JAN)	包装単位
	ケモセーフロックコネクタ	ケモセーフロックコネクタ(オス)、スピニング機構付き	KL-MS	4987892047619	50
		ケモセーフロックコネクタ(オス)、スピニング機構付き、キャップ付き	KL-MSC	4987892058752	
		ケモセーフロックコネクタ(メス)	KL-FN	4987892047671	
	ケモセーフロックバイアルアダプター	13mm口径用	KL-VA130	4987892047718	50
		バルーン式、ユニバーサルタイプ	KL-VA002	4987892047879	
		バルーン式、20mm口径用	KL-VA202	4987892047916	
	ケモセーフロックバイアルアダプター(フィルター式)	フィルター式、ユニバーサルタイプ	KL-VA001	4987892047756	50
		フィルター式、20mm口径用	KL-VA201	4987892047794	
	ケモセーフロックバッグスパイク		KL-BS001	4987892047978	50

一般的名称:薬液調整用器具	販売名:ケモセーフロックコネクタ	医療機器届出番号:13B1X00101000073
一般的名称:薬液調整用器具	販売名:ケモセーフロックバイアルアダプター	医療機器届出番号:13B1X00101000074
一般的名称:薬液調整用器具	販売名:ケモセーフロックバイアルアダプター(フィルター式)	医療機器届出番号:13B1X00101000075
一般的名称:調整用薬液注入コネクタ	販売名:ケモセーフロックバッグスパイク	医療機器届出番号:13B1X00101000076

G020 無菌製剤処理料

- | | |
|---|---|
| <p>1 無菌製剤処理料1 (悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)</p> <p>イ 閉鎖式接続器具を使用した場合 180点/日</p> <p>ロ イ以外の場合 45点/日</p> | <p>(3) 無菌製剤処理料1のうちイについては、バイアル内外の差圧を調節する機構を有することにより、薬剤の飛散等を防止する閉鎖式接続器具を使用した場合は、当該器具の製品名及び数量を(1)に基づき記録すること。</p> |
|---|---|

出典:医科点数表の解釈 平成28年4月版 社会保険研究所

本製品の詳細は添付文書をご参照ください。



薬剤のより安全な取扱いと、医療従事者の安心のために。

ケモセーフロックは、薬剤の安全な取扱いのために、様々な工夫を施した抗がん薬投与システムです。

CSTDとは

薬剤を調製・投与する際に、外部の汚染物質がシステム内に混入することを防ぐと同時に、液状あるいは気化/エアロゾル化したHDが外に漏れ出すことを防ぐ構造を有する器具

引用：がん薬物療法における曝露対策共同ガイドライン2015年版
日本がん看護学会 / 日本臨床腫瘍学会 / 日本臨床腫瘍薬学会 2015;P39 金原出版

安全・安心のために

天面に薬剤が触れない構造

接続部や混注口に薬液が触れない構造です。



For Nothing in, Nothing out

外部の汚染物質がシステム内に混入することを防ぐと同時に、ハザーダスドラッグまたはその揮発成分のシステム外への漏出を防ぐ構造を有しています。

一度接続したら外れないスピニング機構

廃棄まで、接続外れや漏出を防ぐために、一度接続したら外れない機構を採用。



安心を細部にも

針刺し防止のため、金属針のない構造。

簡単

シンプルな差圧調整*

液体製剤でも凍結乾燥製剤でも直感的に薬液採取操作ができます。

*ケモセーフロックバイアルアダプター バルーン式




手間がかからなくて良いね。

確実に

音で接続を確認

コネクタを接続すると「カチッ」と音がするカチットロック™を採用。

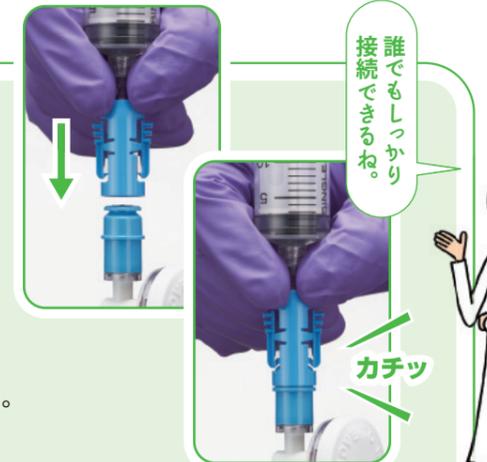

誰でもしっかりと接続できるね。

カチッ

いつも安心して使えるね！

